



GC Fujirock® EP Classic
GC Fujirock® EP Premium
GC Base Stone

Сімейство
ГІПСІВ
від GC

Естетика
починається тут

./GC./

Неймовірна якість – те, що робить гіпси від GC найпопулярнішими у Європі. Сімейство гіпсів Fujirock використовується для виготовлення будь-яких типів стоматологічних конструкцій. Вони спеціально розроблені для створення вражаюче точних моделей та штампиків і повністю відповідають усім вимогам сучасної зуботехнічної лабораторії.



Відповідно до системного підходу GC: «Перевірене сімейство гіпсів для будь-яких вимог та показань», ми представляємо три версії гіпсу, які можна комбінувати, щоб створити ідеальний фундамент естетичності вашої роботи:

GC Fujirock® EP **Classic**, справжній універсальний гіпс

GC Fujirock® EP **Premium**, покращений гіпс для технологій роботи найвищого рівня
GC Base Stone, цокольний гіпс із виключною текучістю та мінімальним розширенням

Кожен гіпс випускається у декількох кольорах, це дозволяє вам створити саме ті комбінації відтінків, що якнайкраще представлять вашу роботу... та вашу лабораторію.

Сімейство гіпсів від GC ... фундамент успіху

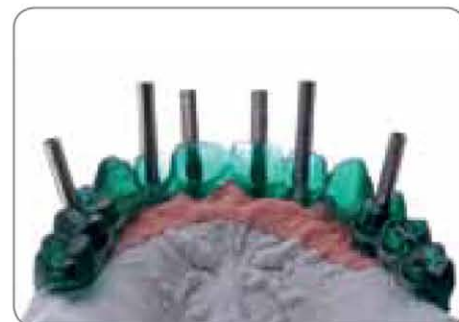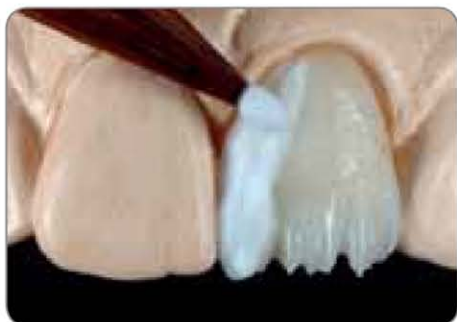



Три гіпси - необмежені можливості



GC Fujirock® EP Classic

GC Fujirock® EP Classic повністю відповідає своєму імені. Один із найпопулярніших «класичних» стоматологічних супергіпсів IV Класу - ідеальний для будь-якого типу ортопедичної конструкції: поєднує у собі високу точність, видатну крайову міцність та стійкість до стискання. GC Fujirock® EP Classic володіє відмінною текучістю та зберігає свої тиксотропні властивості для надання чудових моделювальних характеристик та легкого залиття без утворення пор.

Оберіть колір, що якнайкраще задовольнить вас у щоденній практиці:

- Золотисто-Коричневий
- Бежевий Топаз



GC Fujirock® EP Premium

GC Fujirock® EP Premium спеціально створений для найсучасніших прецизійних технологій, таких як протяжні роботи на імплантатах або складні суцільнокерамічні конструкції. Покращений склад порошку GC Fujirock® EP Premium та вдосконалений вибір кольорів роблять цей спеціальний гіпс ідеальним варіантом за будь-яких показань.

Оберіть колір, що пасуватиме вашим найкращим роботам:

- Пастельний Жовтий
- Полярний Білий
- Інка Коричневий
- Титановий Сірий



GC Base Stone

GC Base Stone ідеальний для виготовлення цоколів моделей, моделей антагоністів та навчальних моделей. Єдиний стандарт GC «якість перш за все», який властивий усім трьом типам гіпсу, робить комбінацію GC Base Stone з GC Fujirock® EP Classic чи Premium ідеальною для швидкого та легкого створення моделей найвищої якості.

Оберіть ваш власний допоміжний колір:

- Теракотовий Червоний
- Королівський Синій



Мистецтво створення естетики



Fujirock® EP Classic и Premium

Fujirock® EP - Classic

- 890222 Золотисто-Коричневий, упаковка 5 кг
- 890226 Золотисто-Коричневий, упаковка 12 кг
- 890225 Бежевий Топаз, упаковка 5 кг



Fujirock® EP - Premium

- 890364 Пастельний Жовтий, упаковка 4 кг
- 890365 Пастельний Жовтий, упаковка 11 кг
- 890366 Полярний Білий, упаковка 4 кг
- 890367 Інка Коричневий, упаковка 4 кг
- 890368 Титановий Сірий, упаковка 4 кг



GC Fujirock® EP Classic	
Золотисто-Коричневий / Бежевий Топаз	
Співвідношення Порошок / Рідина	100 г / 20 мл
Ручне змішування	15 сек.
Змішування у вакуумному міксері	45 сек.
Час твердіння	10-13 хв.
Час видалення з відбитку	30-40 хв.
Коефіцієнт розширення (через 2 г)	≤ 0.09 %
Міцність на стиснення	≈ 53 МПа

GC Fujirock® EP Premium	
Пастельний Жовтий / Полярний Білий / Інка Коричневий / Титановий Сірий	
Співвідношення Порошок / Рідина	100 г / 20 мл
Ручне змішування	15 сек.
Змішування у вакуумному міксері	45 сек.
Час твердіння	9-12 хв.
Час видалення з відбитку	25-35 хв.
Коефіцієнт розширення (через 2 г)	≤ 0.09 %
Міцність на стиснення	≈ 60 МПа

Base Stone

Base Stone

- 890228 Теракотовий Червоний, упаковка 12 кг
- 890229 Королівський Синій, упаковка 12 кг



Base Stone		
Теракотовий Червоний / Королівський Синій		
	Рідкий Стан	Тиксотропний Стан
Співвідношення Порошок / Рідина	100 г / 26 мл	100 г / 21 мл
Ручне змішування	15 сек.	15 сек.
Змішування у вакуумному міксері	45 сек.	45 сек.
Час твердіння	9 хв.	7,5 хв.
Час видалення з відбитку	30-40 хв.	30-40 хв.
Коефіцієнт розширення (через 2 г)	≤ 0.08 %	≤ 0.08 %
Міцність на стиснення	≈ 45 МПа	≈ 50 МПа

Усі упаковки легко відкриваються та щільно закриваються пластиковою кришкою, що забезпечує герметичний захист від вологи.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEE Ukraine
04071 м. Київ
вул. Межигірська 50,
оф. 37
Тел.: (044) 463.62.66
ukraine@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

Офіційний дистриб'ютор
компанії GC в Україні:
Група компаній "КРИСТАР"
04071, м. Київ,
вул. Межигірська, 50, оф. 1
Тел/Факс: (044) 503-11-11
info@kristar.ua
www.kristar.ua

